




Compacta y robusta, no hay otra balanza que puede superar la serie CORE® por valor y facilidad de uso. La CORE tiene una función superior y diseño elegante, pero se ha creado para la utilidad. Su carcasa resistente de plástico ABS soporta entornos de laboratorio del campo y clases. El plato de acero inoxidable es desmontable, permitiendo la limpieza fácil. La protección de sobrecarga de tres puntos ShockProtect® protege la celda de carga, lo que significa que la CORE puede aguantar sobrecargas de hasta 200kg, sin dañar el mecanismo de pesaje. Para la seguridad, tiene una ranura incorporada la cual es compatible con candados y cables de tipo Kensington. La portabilidad no es un problema, ya que la CORE funciona con batería o adaptador de CA. Su función de apagado automático prolonga la vida de la batería. Un gancho conveniente de pesaje por debajo de la balanza facilita el pesaje de densidad y mediciones de gravedad específicas.

Cosecha los beneficios de esta balanza agrícola fiable y portátil

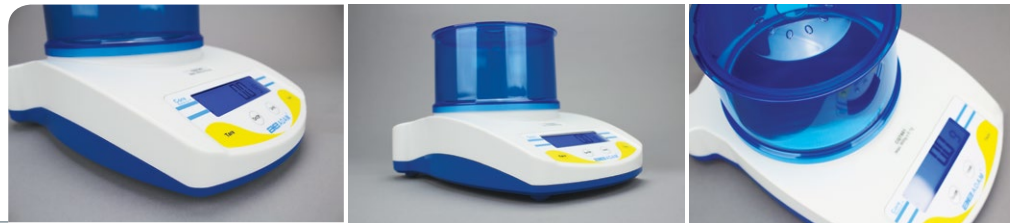

Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no están en uso (solamente con plato de 120mm)
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Dos teclas tara facilitan la operación zurda o diestra
- Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para prevenir el robo de la unidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Característica ShockProtect® de tres puntos, evita daños por sobrecarga a los componentes internos
- Gancho para pesar por debajo incluido
- Función de auto apagado programable para ahorrar energía
- Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)

Aplicaciones

- Pesaje

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2000	CQT 2601	CQT 5000
Capacidad	200g	250g	600g	1500g	2000g	2600g	5000g
Legibilidad	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g
Tamaño del plato	4.7" ø / 120mm ø				5.7" ø / 145mm ø		
Unidades de medida	g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tL.T						
Tiempo de estabilización (sec)	2						
Calibración	Calibración Externa						
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.7"/ 18mm de alto						
Alimentación de corriente	Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA / Pilas 6 x AA						
Temperatura de operación	0° a 40°C						
Carcasa	ABS						
Cabina	Redondo 5.1" ø x 3.5" / 130mm ø x 90mm				No Disponible		
Dimensiones totales	6.7"x9.8"x3.1" / 171x250x80mm (axpxa)						
Peso Neto	2lb / 0.9kg						

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
308232033	Cubierta de Protección
308232036	Cubierta de Protección (5 piezas)
308232037	Cubierta de Protección (10 piezas)
308002042	Maletín de transporte
700100046	Candado y Cable Tipo Kensington
700660290	Certificado de Calibración
700100035	M1 1g - 100g Juego de pesas de calibración, incluye estuche para almacenar las pesas
700100071	M1 1g - 2kg Juego de pesas de calibración, incluye estuche para almacenar las pesas
700100072	M1 200g Pesa de Calibración
700100060	M1 500g Pesa de Calibración
700100029	M1 1kg Pesa de Calibración
700100030	M1 2kg Pesa de Calibración
700100012	F1 200g Pesa de Calibración

Características principales



Candado y Cable Tipo Kensington

El cable y candado de seguridad se pueden conectar a las cerraduras incorporadas en las balanzas y básculas para mantenerlas en un lugar seguro. El cable de acero flexible es difícil de cortar, y el candado de combinación le permite a usuarios elegir una combinación de números para mayor seguridad. allows users to choose a combination number for added security.



Cubierta de Protección

Las cubiertas de protección proporcionan una manera fácil y asequible para ayudar a mantener la balanza limpia y protegida.



Maletín de transporte

Construcción sólida con esquinas de acero inoxidable, el maletín contiene acolcha de espuma suave para proteger la balanza o báscula. Una correa para el hombro está incluida, y se puede asegurar.

Suministrados por